

仅供研究使用，不可用于临床诊断  
适用于 Illumina 和 MGI 测序平台  
应用广泛，可进行探针定制

如有问题，请联系：

🌐 [www.igenetech.com/support](http://www.igenetech.com/support)  
📞 010-89146623  
✉ [support@igenetech.com](mailto:support@igenetech.com)

# TargetSeq One<sup>®</sup> Hyb & Wash Kit v2.0

## 使用说明书

仅适用于 TargetSeq<sup>®</sup> Target Probes with Region Size < 30 Mb 系列产品

版本号：C.2，2023 年 9 月

文档号：PROT230304

样本提取

文库制备

靶向捕获

上机测序

数据分析

## 版本说明

生产公司：艾吉泰康（嘉兴）生物科技有限公司

### 使用说明

本说明书适用于 TargetSeq One® Hyb & Wash Kit v2.0，针对 TargetSeq® Target Probes with Region Size < 30 Mb 产品，使用前请仔细阅读本说明书，并严格按照说明书内容进行实验。

### 试剂盒概述

TargetSeq One® Hyb & Wash Kit v2.0，是针对基因组目标区域进行液相探针杂交捕获的试剂盒，适用于 Illumina 和 MGI 高通量测序平台。艾吉泰康基于多因素算法对基因组目标区域进行探针设计，合成生物素标记的特异性捕获探针，本试剂盒可以对目标序列进行捕获富集，提升捕获性能的同时也极大地降低了测序数据量。

### 更新信息

使用说明书名称	修订日期	修订内容摘要
C.2	2023 年 9 月	主要修改了商标、文字描述
C.1	2023 年 3 月	主要优化了目标区域 DNA 捕获步骤的实验操作
C.0	2022 年 6 月	修改适配新产品体系
B.0	2022 年 3 月	优化了样式
A.0	2021 年 11 月	首次发布

## 试剂盒组成

用于杂交捕获的试剂包括 TargetSeq One® Hyb & Wash Kit v2.0, TargetSeq® Blocking Oligo, TargetSeq® Target Probes 和 TargetSeq® Cap Beads。



**TargetSeq One® Hyb & Wash Kit v2.0 和 TargetSeq® Blocking Oligo 与文库类型有关。请根据文库类型选择正确的版本。**

### TargetSeq One® Hyb & Wash Kit v2.0

TargetSeq One® Hyb & Wash Kit v2.0 有针对 Illumina、MGI SI 和 MGI DI 文库类型的三种不同版本。TargetSeq One® Hyb & Wash Kit v2.0 包含以下三个不同的模块。

产品名称	组成	储存温度
TargetSeq One® Hyb & Wash Kit v2.0*	TargetSeq One® Hyb & Wash Kit v2.0 (Module A)	-20°C ± 5°C
	TargetSeq One® Hyb & Wash Kit v2.0 (Module B)	15°C ~ 25°C
	TargetSeq One® Hyb & Wash Kit (Module C)	-20°C ± 5°C

\*TargetSeq One® Hyb & Wash Kit v2.0 有针对 Illumina、MGI SI 和 MGI DI 文库类型的三种不同版本，与 Module C 一致，分别为 TargetSeq One® Hyb & Wash Kit (Module C, for Illumina), TargetSeq One® Hyb & Wash Kit (Module C, for MGI SI) 和 TargetSeq One® Hyb & Wash Kit (Module C, for MGI DI)。

#### TargetSeq One® Hyb & Wash Kit v2.0 (Module A)

管盖颜色	组分	总量		储存温度
		16 rxn	96 rxn	
紫色	Hyb Human Block	88 µL	540 µL	-20°C ± 5°C
紫色	RNase Block	88 µL	540 µL	
紫色	TargetSeq One® Hyb Buffer v2	360 µL	2*1080 µL	

#### TargetSeq One® Hyb & Wash Kit v2.0 (Module B)

管盖颜色	组分	总量		储存温度
		16 rxn	96 rxn	
瓶装	Binding Buffer	14 mL	84 mL	15°C ~ 25°C
瓶装	TargetSeq One® Wash Buffer 2 v2	18 mL	108 mL	
瓶装	Wash Buffer 1	4 mL	24 mL	

#### TargetSeq One® Hyb & Wash Kit (Module C)

管盖颜色	组分	总量		储存温度
		16 rxn	96 rxn	
橙色	Post PCR Master Mix	450 µL	2*1350 µL	-20°C ± 5°C
橙色	Post PCR Primer (25 µM)*	32 µL	192 µL	

\*TargetSeq One® Hyb & Wash Kit (Module C) 中的 Post PCR Primer (25 µM) 有针对 Illumina、MGI SI 和 MGI DI 文库类型的三种不同版本，与 Module C 版本相对应。另外，艾吉泰康可提供 TargetSeq® Universal Post PCR Primer (25 µM)，适用于 Illumina 平台文库，5' 端含磷酸化修饰，终文库无需 App-A 转化，直接环化后可在 MGI 平台测序，同时也支持 Illumina 平台测序。

## TargetSeq® Blocking Oligo

TargetSeq® Blocking Oligo 有两种类型, 其中 TargetSeq® Eco Universal Blocking Oligo 可以封闭 3 μg 以内的文库, TargetSeq® Universal Blocking Oligo 可以封闭 6 μg 以内的文库。同时, TargetSeq® Blocking Oligo 也包括针对 Illumina、Illumina NXT、MGI SI 和 MGI DI 文库类型的四种不同版本。请根据杂交文库总量和文库类型选择合适的 Blocking Oligo。

### TargetSeq® Universal Blocking Oligo

管盖颜色	组分	总量			储存温度
		4 rxn	16 rxn	96 rxn	
紫色	TargetSeq® Universal Blocking Oligo	10 μL	36 μL	200 μL	-20°C ± 5°C

### TargetSeq® Eco Universal Blocking Oligo

管盖颜色	组分	总量		储存温度
		16 rxn	96 rxn	
紫色	TargetSeq® Eco Universal Blocking Oligo	36 μL	200 μL	-20°C ± 5°C

## TargetSeq® Target Probes

管盖颜色	组分	总量		储存温度
		16 rxn	96 rxn	
红色	TargetSeq® Target Probes*	36 μL	216 μL	<-70°C

\* 请注意, 本说明书只适用于 TargetSeq® Target Probes with Region Size < 30 Mb 系列产品。

## TargetSeq® Cap Beads & Nuclease-Free Water

管盖颜色	组分	总量			储存温度
		1000 μL each	5 mL each	50 mL each	
绿色或瓶装	TargetSeq® Cap Beads*	1000 μL	5 mL	50 mL	2 ~ 8°C
白色或瓶装	Nuclease-Free Water	1000 μL	5 mL	50 mL	

\*TargetSeq® Cap Beads 是用于杂交捕获的链霉亲和素磁珠, 与 IGT® Pure Beads 不同。Thermo Fisher 公司提供的 Dynabeads™ MyOne™ Streptavidin T1 (货号 65602) 可作为 TargetSeq® Cap Beads 的替代产品。

## 自备的试剂、仪器和耗材



以下为艾吉泰康推荐品牌，也可使用已有满足实验要求的替代试剂和耗材。

### 自备试剂

序号	名称	推荐产品	供应商
1	无水乙醇	市面主流品牌	市面主流品牌
2	无核酸酶水	Nuclease-Free Water	Ambion (Cat # AM9930)
3	纯化磁珠	Agencourt AMPure XP Kit	Beckman (Cat # A63880)
		IGT® Pure Beads	艾吉泰康 (Cat # C80661)
4	文库片段质检试剂（请根据仪器选择对应的试剂盒使用）	Agilent DNA 1000 Kit	Agilent (Cat # 5067-1504)
		S2 Cartridge (Standard Cartridge)	BiOptic (Cat # C105101)
5	Qubit 定量试剂	Qubit dsDNA HS Assay Kit	Thermo Fisher (Cat # C47257)


### 自备仪器

序号	名称	推荐产品	供应商
1	真空浓缩仪和泵	Concentrator Plus	Eppendorf (Cat # 5305000193)
2	96 孔 PCR 管磁力架	DynaMag-96 Side	Thermo Fisher (Cat # 12331D)
3	片段分析仪（任选一种使用）	Agilent 2100 Bioanalyzer system	Agilent (Cat # G2939AA)
		Qsep 100	BiOptic (Cat # Qsep100)
4	核酸定量	Qubit® 4.0 Fluorometer	Thermo Fisher (Cat # Q33226)
5	恒温混匀仪或金属浴，0.2 mL 模块	Eppendorf ThermoMixer® C	Eppendorf (Cat # 5382000015)
6	涡旋振荡器	市面主流产品	市面主流品牌
7	微型离心机	市面主流产品	市面主流品牌
8	冰盒	市面主流产品	市面主流品牌
9	PCR 仪	市面主流产品	市面主流品牌
10	垂直翻转混匀仪，0.2 mL 模块	市面主流产品	市面主流品牌
11	水浴锅	市面主流产品	市面主流品牌

### 自备耗材

序号	名称	推荐产品	供应商
1	0.5 mL Qubit 管	Qubit® Assay Tubes	Thermo Fisher (Cat # Q32856)
2	0.2 mL PCR 管	市面主流产品	市面主流品牌
3	0.2 mL 八联排 PCR 管	市面主流产品	市面主流品牌
4	10 µL 移液器吸头	市面主流产品	市面主流品牌
5	200 µL 移液器吸头	市面主流产品	市面主流品牌

## 工作原理及流程图

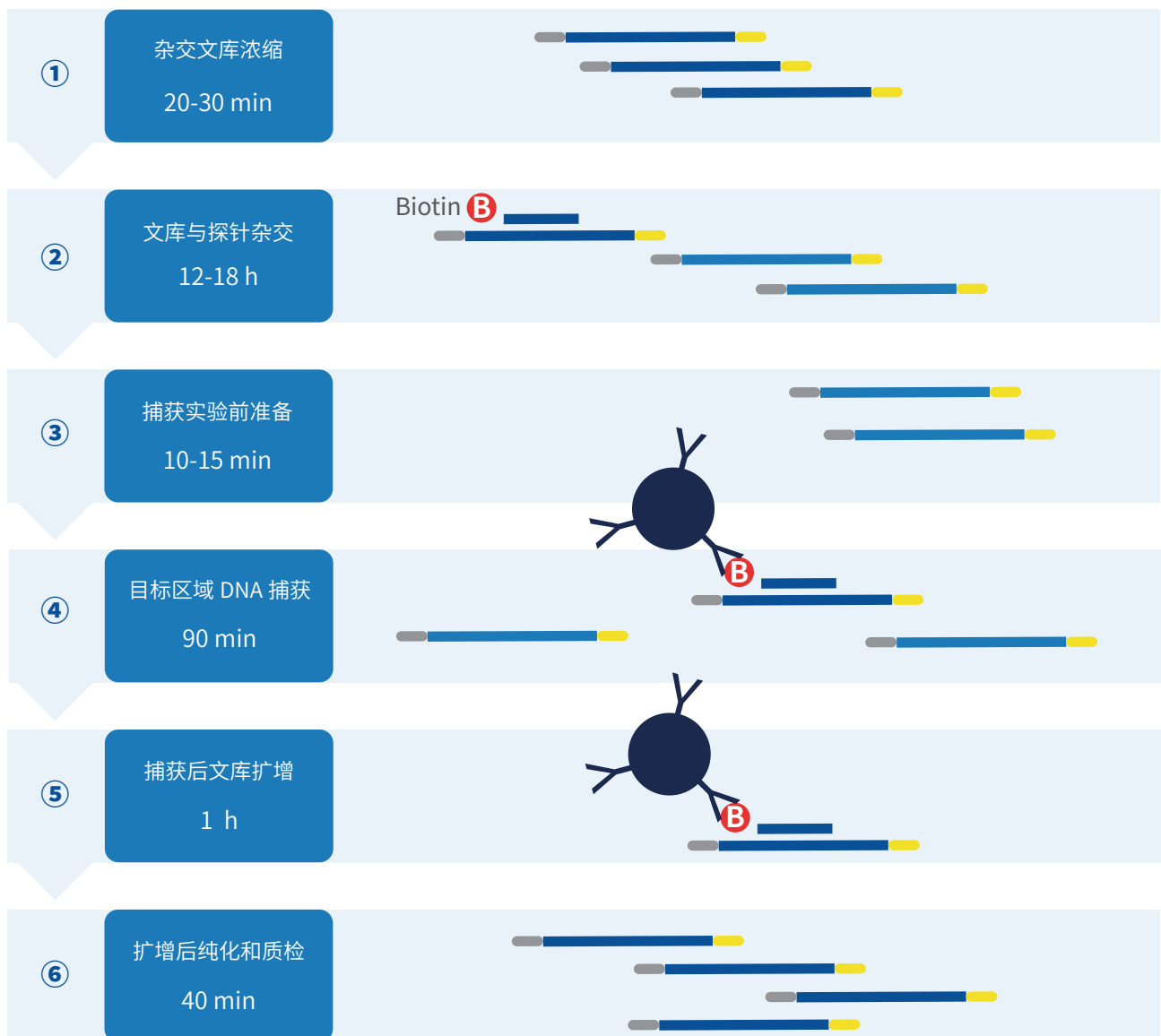

## 使用前说明

欢迎使用 TargetSeq One® Hyb & Wash Kit v2.0，在使用前请确认以下几点：

- 加样必须使用无核酸酶的耗材和器械，最好可以对环境进行核酸酶灭活；
- 杂交捕获前文库经过质检，并且是合格预文库；
- 建议杂交时间为 12~18 h，请合理安排时间；
- 使用的接头封阻序列与预文库使用的接头是匹配的；
- 使用的 Post PCR Primer 与预文库是匹配的。

如果以上均满足，即可开始实验

## STEP 1 杂交捕获实验前期准备

## 实验备注区

### 需要使用到的试剂：

- Hyb Human Block
- RNase Block
- TargetSeq® Blocking Oligo
- TargetSeq® Target Probes
- TargetSeq One® Hyb Buffer v2

### 需要使用到的仪器：

- 涡旋振荡器
- 冰盒
- 微型离心机
- 水浴锅

- 1.1 将 Hyb Human Block、RNase Block 从 -20°C 的冰箱中取出，置于冰盒上融化，融化后短暂涡旋混匀并瞬时离心，置于冰盒上暂存。
- 1.2 将配套的 TargetSeq® Blocking Oligo 从 -20°C 的冰箱中取出，置于冰盒上融化，短暂涡旋混匀并瞬时离心，置于冰盒上暂存。
- 1.3 将需要用到的探针从 -80°C 冰箱取出，置于冰盒上融化，短暂涡旋混匀并瞬时离心，置于冰盒上暂存。
- 1.4 将要进行杂交捕获的文库从 -20°C 的冰箱中取出，置于冰盒上融化，短暂涡旋混匀并瞬时离心，置于冰盒上暂存。
- 1.5 将 TargetSeq One® Hyb Buffer v2 取出，室温融化，短暂涡旋混匀并瞬时离心，若有沉淀，需要将 TargetSeq One® Hyb Buffer v2 置于 37°C 水浴锅中加热，待试剂完全溶解后再使用。



## STEP 2 文库与探针杂交

## 实验备注区

### 需要使用到的试剂：

- TargetSeq One® Hyb Buffer v2
- Hyb Human Block
- TargetSeq® Blocking Oligo
- RNase Block
- Nuclease-Free Water
- TargetSeq® Target Probes

### 需要使用到的仪器：

- 真空浓缩仪
- 涡旋振荡器
- 微型离心机
- PCR 仪



下列步骤采用真空浓缩方案，如果实验室不具备真空浓缩的条件时，可选磁珠浓缩和文库与探针杂交法，具体步骤详见附件一。

2.1 单个文库杂交时，取 750 ng 文库加入 PCR 管中，做好标记；多个文库混合杂交时，每个文库加入 500 ng。



请注意文库投入总量，需要根据文库投入总量选配一种合适的 TargetSeq® Blocking Oligo 进行杂交反应：

- TargetSeq® Universal Blocking Oligo 可以封闭 6 μg 以内的文库；
- TargetSeq® Eco Universal Blocking Oligo 可以封闭 3 μg 以内的文库。

2.2 将 PCR 管放入真空浓缩仪，打开 PCR 管盖，浓缩至干燥状态。



浓缩之前可以先用相同体积的水进行浓缩时间测试，估算浓缩所需时间，避免因浓缩时间过长导致过度干燥，造成样本损失。

2.3 文库浓缩完成后，按下表配制杂交反应液：

试剂	体积
TargetSeq One® Hyb Buffer v2	13 μL
Hyb Human Block	5 μL
TargetSeq® Blocking Oligo	2 μL
RNase Block	5 μL
Nuclease-Free Water	3 μL
TargetSeq® Target Probes	2 μL
总体积	30 μL



杂交反应液配制时，最后加入探针，或者在 RNase Block 加入后再加入探针，因为 RNase Block 可以保护探针。

2.4 将杂交反应液加入到干燥的文库中，涡旋振荡 30 s 以确保干燥在管底的 DNA 溶解，并短暂离心。

2.5 设置 PCR 仪参数如下，将杂交反应液置于 PCR 仪上，运行程序：

温度	时间
热盖温度 85°C	
80°C	5 min
50°C	Hold

2.6 建议杂交时间为 12~18 h，程序结束前 30 min 进行 STEP 3。

## STEP 3 捕获实验前准备

## 实验备注区

### 需要使用到的试剂：

- Cap Beads
- 80% 乙醇（新配制）
- Wash Buffer 1
- TargetSeq One® Wash Buffer 2 v2
- Binding Buffer

### 需要使用到的仪器：

- 水浴锅
- 磁力架
- 涡旋振荡器
- 微型离心机

- 3.1 提前将 Cap Beads 从 4°C 冰箱中取出，充分混匀并置于室温平衡 30 min。
- 3.2 提前用无水乙醇和 Nuclease-Free Water 配制 80% 乙醇，置于室温条件下暂存。
- 3.3 将 Wash Buffer 1 取出，如果有沉淀析出，请将 Wash Buffer 1 置于 37°C 水浴锅中加热，待沉淀完全溶解后再使用。
- 3.4 将 TargetSeq One® Wash Buffer 2 v2 取出，置于 50°C 的水浴锅上预热。
- 3.5 Cap Beads 使用前再次震荡混匀，取 50  $\mu$ L Cap Beads 加入新的 PCR 管内，置于磁力架上 1 min，待溶液澄清，移弃上清。



捕获所用磁珠需采用 Cap Beads，不建议使用其他型号的磁珠如 C1、M270、M280 等替代，一定不要错用成纯化磁珠！

- 3.6 从磁力架上取下 PCR 管，加入 180  $\mu$ L 的 Binding Buffer 吸打或涡旋振荡混匀，以重悬磁珠。
- 3.7 瞬时离心后将 PCR 管置于磁力架上 1 min，待溶液澄清，移弃上清。
- 3.8 重复步骤 3.6~3.7 两次，共使用 Binding Buffer 清洗磁珠三次。
- 3.9 从磁力架上取下 PCR 管，加入 180  $\mu$ L Binding Buffer 吸打或涡旋混匀，立即进行 STEP 4。

## STEP 4 目标区域 DNA 捕获

## 实验备注区

### 需要使用到的试剂：

- Cap Beads (清洗后重悬在 Binding Buffer 中)
- Wash Buffer 1
- TargetSeq One® Wash Buffer 2 v2 (50°C 预热)
- 80% 乙醇 (新配制)
- Nuclease-Free Water

### 需要使用到的仪器：

- PCR 仪
- 垂直旋转混匀仪
- 恒温混匀仪或金属浴
- 磁力架
- 涡旋振荡器
- 微型离心机

- 4.1 保持 STEP 2 的杂交产物在 PCR 仪上，将 STEP 3 准备好的 180  $\mu$ L Cap Beads 加入到杂交产物中，吸打混匀。
- 4.2 盖好管盖，将 PCR 管从 PCR 仪上取下，置于垂直旋转混匀仪上，转速不超过 10 rpm，室温结合 30 min (如果实验室无垂直翻转混匀仪，可以在室温下结合 30 min，期间每隔 5 min 上下颠倒数次混匀)。
- 4.3 将 PCR 管取下，瞬时离心，置于磁力架上 2 min，待溶液澄清后，移弃上清液。
- 4.4 从磁力架上取下 PCR 管，向 PCR 管内加入 150  $\mu$ L 的 Wash Buffer 1，轻轻吸打混匀，以重悬磁珠，更换新的管盖，然后置于垂直旋转混匀仪上室温清洗 15 min，转速不超过 10 rpm。
- 4.5 将 PCR 管取下，瞬时离心，置于磁力架上 2 min，待溶液澄清后，移弃上清液。
- 4.6 从磁力架上取下 PCR 管，加入 150  $\mu$ L 50°C 预热的 TargetSeq One® Wash Buffer 2 v2，轻轻吸打混匀，瞬时离心，置于恒温振荡混匀仪或金属浴上，50°C 孵育 10 min。
- 4.7 将 PCR 管取下，瞬时离心，置于磁力架上 2 min，待溶液澄清后，移弃上清液。
- 4.8 重复步骤 4.6~4.7 一次；对于探针覆盖区域小于 200 kb 的 Panel，可以重复 4.6~4.7 两次，能够进一步提升捕获的特异性和稳定性。
- 4.9 从磁力架上取下 PCR 管，加入 150  $\mu$ L 50°C 预热的 TargetSeq One® Wash Buffer 2 v2，轻轻吸打混匀，瞬时离心，置于恒温振荡混匀仪或金属浴上，50°C 孵育 10 min。
- 4.10 将 PCR 管取下，瞬时离心，轻轻吸打混匀，将全部液体 (包含磁珠) 转移到新的 PCR 管中，将新的 PCR 管置于磁力架上 2 min，待溶液澄清后，移弃上清液。
- 4.11 保持 PCR 管在磁力架上，向 PCR 管内加入 200  $\mu$ L 80% 乙醇，静置 30 s 后彻底移弃乙醇溶液 (可用 10  $\mu$ L 移液器移弃残留乙醇)，室温晾干磁珠使残留的乙醇完全挥发 (干燥过程中，注意观察磁珠表面情况，避免磁珠过度干燥)。
- 4.12 向 PCR 管加入 24  $\mu$ L Nuclease-Free Water，从磁力架上取下 PCR 管，短暂涡旋重悬混匀磁珠，进行 STEP 5 的扩增反应。



**一定不要丢弃磁珠！捕获后的文库是结合在磁珠上的。**

## STEP 5 捕获后 PCR 扩增

## 实验备注区

需要使用到的试剂：

- Post PCR Master Mix
- Post PCR Primer

需要使用到的仪器：

- 涡旋振荡器
- 微型离心机
- PCR 仪

5.1 提前将 Post PCR Master Mix、Post PCR Primer 从 -20°C 冰箱中取出，置于冰盒上融化，融化后置于冰盒上暂存。

5.2 PCR 前请再次核对 Post PCR Primer 是否使用正确，短暂涡旋 Post PCR Master Mix、Post PCR Primer，瞬时离心。

5.3 按下表配制 PCR 反应液：

试剂	体积
STEP 4 得到的磁珠悬液	24 $\mu$ L
Post PCR Primer	1 $\mu$ L
Post PCR Master Mix	25 $\mu$ L
总体积	50 $\mu$ L



Post PCR Primer 有针对 Illumina、MGI SI 和 MGI DI 文库类型的不同版本。其中，通用版 TargetSeq® Universal Post PCR Primer (25  $\mu$ M) 适用于 Illumina 平台文库，5' 端含磷酸化修饰，终文库无需 App-A 转化，直接环化后可在 MGI 平台测序，同时也支持 Illumina 平台测序，使用时直接替换 Post PCR Primer 即可。

5.4 配制完成后，使用移液器吸打混匀，混匀后快速转移到 PCR 仪上，请勿使用涡旋后离心的方法来混匀。

5.5 设置 PCR 仪程序如下，将 PCR 反应液置于 PCR 仪上，运行程序。

温度	时间	Post-PCR 循环数
热盖温度 105°C		
95°C	1 min	1
98°C	20 s	N cycles
60°C	30 s	
72°C	30 s	
72°C	5 min	1
4°C	hold	1

文库总投入量	Post-PCR 循环数
750 ng	N
1.5 $\mu$ g	N-1
3 $\mu$ g	N-2
6 $\mu$ g	N-3



PCR 循环数请参考探针 TargetSeq® Target Probe 管壁标签参数或探针说明文件，Post-PCR 循环数与杂交时文库总投入量相关，当杂交时文库投入量较多时，可适当降低 Post-PCR 的循环数。

如果捕获文库为 MGI 平台文库，建议多加两个循环，因为 MGI 平台上机测序所需文库量较多。

5.6 程序完成后，进行 STEP 6 的磁珠纯化。

此步骤为可暂停步骤，可在 -20°C 下暂存一个月。

## STEP 6 扩增后纯化

## 实验备注区

### 需要使用到的试剂：

- 纯化磁珠 (IGT® Pure Beads)
- 80% 乙醇 (新配制)
- Nuclease-Free Water

### 需要使用到的仪器：

- 涡旋振荡器
- 微型离心机
- 磁力架

6.1 取出纯化磁珠，混匀并置于室温平衡 30 min。



纯化步骤使用磁珠为 IGT® Pure Beads，若选用其它品牌纯化磁珠，需咨询对应供应商，并通过预实验自行摸索合适的磁珠比例，避免纯化失败。

6.2 在 STEP 5 的 PCR 产物中，加入 1.1 倍体积的磁珠 (55  $\mu$ L)，吸打或涡旋混匀，室温静置 5 min。

6.3 瞬时离心，并将 PCR 管置于磁力架上 3 min，待溶液澄清。

6.4 保持 PCR 管在磁力架上，移弃上清，向 PCR 管内加入 200  $\mu$ L 80% 乙醇溶液，静置 30 s。

6.5 保持 PCR 管在磁力架上，移弃上清，再次向 PCR 管内加入 200  $\mu$ L 80% 乙醇溶液，静置 30 s 后彻底移弃上清（可瞬时离心，将挂壁液体离心至管底，再使用 10  $\mu$ L 移液器移弃底部残留的乙醇溶液）。

6.6 保证 PCR 管在磁力架上，室温静置 3~5 min，晾干磁珠使残留的乙醇彻底挥发（干燥过程中，注意观察磁珠表面情况，避免磁珠过度干燥）。

6.7 加入 25  $\mu$ L 的 Nuclease-Free Water，将 PCR 管从磁力架取下，吸打或涡旋混匀，室温静置 2 min。

6.8 瞬时离心，将 PCR 管置于磁力架上 2 min，待溶液澄清。

6.9 用移液器吸取 23  $\mu$ L 上清液，转移到新的 PCR 管中；将捕获文库置于 -20°C 冰箱中保存，捕获文库在 -20°C 冰箱中可保存一个月。

6.10 取 1  $\mu$ L 文库使用 Qubit dsDNA HS Assay Kit 试剂在 Qubit 4.0 Fluorometer 上进行文库浓度测定，记录文库浓度。

6.11 取 1  $\mu$ L 文库使用片段分析仪进行片段质检，片段大小应与预文库大小基本一致。

**实验结束，可以安排上机测序！**



## 附录一 磁珠法文库浓缩及文库与探针杂交操作流程

### 需要使用到的试剂：

- 纯化磁珠 (IGT® Pure Beads)
- 80% 乙醇 (新配制)
- Nuclease-Free Water

### 需要使用到的仪器：

- 磁力架
- 微型离心机
- PCR 仪

1. 单个文库杂交时，取 750 ng 文库加入 PCR 管中，做好标记；多个文库混合杂交时，每个文库加入 500 ng。
2. 向文库中加入 1.8 倍体积的纯化磁珠，用移液器轻轻吸打混匀，室温孵育 5 min。
3. 把 PCR 管置于磁力架上 3 min，待溶液澄清。
4. 保持 PCR 管在磁力架上，移弃上清，向 PCR 管内加入 200  $\mu$ L 80% 乙醇溶液，静置 30 s。
5. 保持 PCR 管在磁力架上，移弃上清，再次向 PCR 管内加入 200  $\mu$ L 80% 乙醇溶液，静置 30 s 后彻底移弃上清（可瞬时离心，将挂壁液体离心至管底，再使用 10  $\mu$ L 移液器移弃底部残留的乙醇溶液）。
6. 保证 PCR 管在磁力架上，室温静置 3~5 min，晾干磁珠使残留的乙醇彻底挥发（干燥过程中，注意观察磁珠表面情况，避免磁珠过度干燥）。
7. 按下表向 PCR 管中加入杂交反应液：

试剂	体积
TargetSeq One® Hyb Buffer v2	13 $\mu$ L
Hyb Human Block	5 $\mu$ L
TargetSeq® Blocking Oligo	2 $\mu$ L
RNase Block	5 $\mu$ L
Nuclease-Free Water	3 $\mu$ L
TargetSeq® Target Probes	2 $\mu$ L
总体积	30 $\mu$ L

8. 吸打混匀，室温静置 3 min。
9. 瞬时离心，将 PCR 管置于磁力架上 3 min，待溶液澄清。
10. 用移液器吸取 28  $\mu$ L 上清至新的 PCR 管中，轻轻吹打混匀，瞬时离心。
11. 设置 PCR 仪参数如下，将杂交反应液置于 PCR 仪上，运行程序。

温度	时间
	热盖温度 85°C
80°C	5 min
50°C	Hold

12. 建议杂交反应时间为 12~18 h，程序结束前进行 STEP 3 操作。

如有任何疑问，请联系：

🌐 [www.igenetech.com/support](http://www.igenetech.com/support) ☎ 010-89146623 ✉ [support@igenetech.com](mailto:support@igenetech.com)

## 实验备忘录



网址：[www.igenetech.com](http://www.igenetech.com)  
邮箱：[support@igenetech.com](mailto:support@igenetech.com)  
电话：010-89146623  
总部地址：北京市昌平区中关村生命科学园生命园路8号院一区9号楼A座3层  
嘉兴子公司地址：浙江省嘉兴市嘉善县大云镇宏业路371号2号楼

仅供研究使用，不可用于临床诊断。

版权声明：本手册版权属于艾吉泰康生物科技（北京）有限公司及其子公司所有，未经本公司书面许可，任何其他个人或组织不得以任何形式将本手册中的各项内容进行复制、拷贝、编辑或翻译成其他语言。本手册中所有商标或标识均属于艾吉泰康生物科技（北京）有限公司、其子公司及其所有者所有。

版本号：C.2，2023年9月  
文档号：PROT230304

官方微信

